

# VISIERE DE PROTECTION NEWSHIELD - Notice -

MERCI POUR TOUT, BON COURAGE.



Fichiers 3D, demandes de livraison, conseils,... :  
<http://www.newshield.org>




### **1 : Avis importants**

- visière imprimée en 3d
- matière PLA/PETG
- Cette visière n'est pas homologuée par les organismes habilités
- Cette visière ne peut pas se substituer aux masques homologués ou autres équipements homologués
- cette visière n'est pas désinfectée, cela doit se faire avant la 1ère utilisation




### **2 : Les différents éléments**

Le support de tête  
"NewShield"

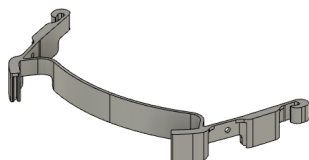

Attaches pour Élastique x2


*Les attaches peuvent différer  
en fonction des élastiques.*

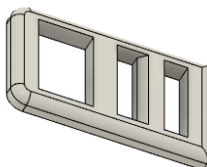


- 1 Feuille de PVC +- 200 microns format A4 (150 microns Mini)
- Élastique (à couper)

### **3 : Montage**

- 1 : Coupez l'élastique pour en former une bande
- 2 : Enfilez l'élastique dans les « Attaches » à chaque extrémité suivant le schéma ci-joint

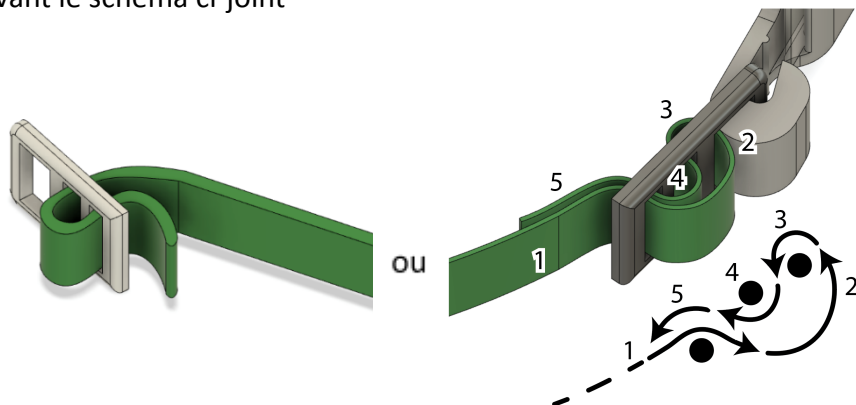

3 : Clipsez les attaches de chaque côté du support « NewShield »

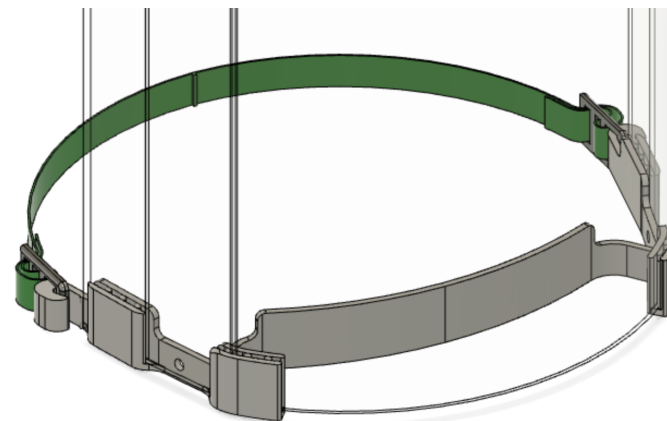

4 : Insérer la feuille PVC dans les 4 « Griffes » en la glissant en mode « Paysage » (la partie la plus large). Un détrompeur permet de vous guider sur la façon d'ajuster la feuille. La feuille se pliera en accordéons pour améliorer la tenue.

